



PHARM'OBSERVANCE PACA 2019

Responsable de projet : Docteur Félicia FERRERA BIBAS



GUIDE DE BONNE PRATIQUE

FICHE PROCEDURE POUR LA REALISATION DU TROD

Test utilisé : marque

LIEU de réalisation du test : espace confidentiel autre (précisez)

Prélèvement oropharyngé réalisé par un pharmacien formé à l'utilisation du TROD :

Nom

.....

Prise de connaissance de la procédure de réalisation du test et de la notice durant l'utilisation du test

oui non

Information du patient sur le résultat du test

Orientation ou délivrance

Port d'une blouse : oui non

Cheveux attachés si longs : oui non

Lavage des mains et application solution antiseptique : oui non

Port de gants : oui non

Champs de travail préparés à l'avance (dispositif lumineux, réactif, tube d'extraction, écouvillon, bandelettes ...)

LE KIT STREPTATESTS est composé de :

- 25 écouvillons stériles
- 25 tubes d'extraction
- 25 abaisses langue
- 1 contrôle positif streptocoque A inactivé et un contrôle négatif streptocoque C inactivé
- Flacons d'extraction A et B
- 1 portoir pour tube d'extraction
- 1 notice d'utilisation et 2 fiches techniques de sécurité


MÉTHODE



1
Prélèvement à l'aide d'un écouvillon.



3
10 x
Introduire l'écouvillon dans le tube d'extraction.
Réaliser une dizaine de rotations.

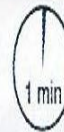

ATTENDRE 1 MINUTE



Exprimer l'écouvillon en pressant les parois du tube.




2
Déposer 4 gouttes de réactif A puis 4 gouttes de réactif B dans le tube d'extraction.



ATTENDRE 5 MINUTES

Immerger la bandelette.
Lire le résultat au bout de 5 minutes.

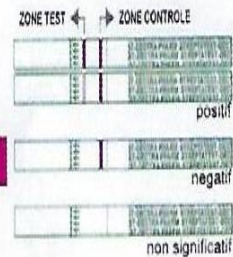

Devant les signes évocateurs d'une angine chez un patient :

- Chez l'adulte, calculer le score Mac Isaac.
- Chez les enfants à partir de 3 ans (jusqu'à 15 ans) et chez l'adulte avec un score Mac Isaac ≥ 2 , proposer au patient un test rapide de diagnostic de l'angine.
- Expliquez le but du test et que c'est pris en charge dans le cadre d'un programme expérimental (gratuité du TROD pour le patient).

1/ Le champs de travail est préparé à l'avance :

Dans un espace confidentialité, éloigné du comptoir, préparer une paillasse propre et désinfectée.

2/ Avec l'accord du patient, réalisation du TROD :

- **Se préparer dans la même approche que les bonnes pratiques de laboratoire**

a/Porter une blouse avec un badge indiquant sa fonction de pharmacien

S'attacher les cheveux si cheveux longs

Mettre des gants adaptés et un masque

Sortir le matériel du kit : le portoir, les flacons de réactifs, l'écouvillon, l'abaisse langue et les solutions de contrôles.

b/Prélèvement pharyngé à l'aide d'un écouvillon

Utiliser un abaisse langue et écouvillonner les zones inflammatoires en évitant le contact avec les dents, les gencives, la langue et les joues.

c/Préparation :

Placer le tube d'extraction sur le portoir

Verser 4 gouttes de réactif A dans le tube d'extraction

Puis 4 gouttes de réactif B

Mélanger par agitation légère

La couleur du mélange vire du rose à l'incolore

d/Extraction :

Introduire l'écouvillon dans le tube

Agiter l'écouvillon en réalisant une dizaine de rotations dans la solution

Attendre 1 minute


Exprimer l'écouvillon en serrant le tube

Jeter l'écouvillon dans un récipient adapté prévu à cet effet.

e/Le test

Plonger la bandelette test dans le tube (flèches vers le bas)

Attendre 5 minutes

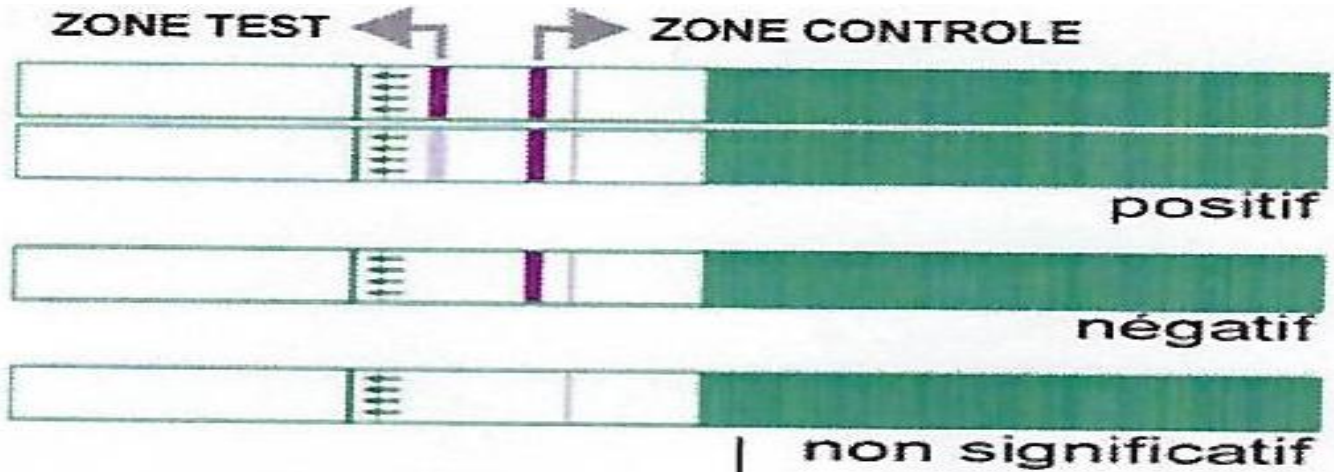

f/Résultat :

REEMPLIR LA FICHE DE RECUEIL DE DONNEES

En cas de test non significatif, recommencer le test !

TEST POSITIF

Rappeler au patient la nécessité d'une prescription d'antibiotique et d'une consultation chez le médecin.

Remettre au patient la lettre au médecin traitant complétée et signée qu'il devra donner au médecin lors de la consultation.

TEST NEGATIF

Selon le cas, délivrer un traitement symptomatique :

Antalgique, Antipyrétique, Collutoires, Pastilles, Sirops..et règles hygièno – diététiques.

Expliquer au patient que si les symptômes persistent plus de 48 h, il faut consulter le médecin traitant ou éventuellement même si le test est négatif conseiller d'aller voir le médecin.

TAMPON PHARMACIE

A L'attention du Docteur

Objet : réalisation d'un Test Rapide d'Orientation Diagnostique des angines à streptocoque du groupe A

Docteur,

Suite à un besoin détecté dans notre officine, quant aux symptômes évoqués par M./Mme/Melle, un test rapide d'orientation diagnostique de l'angine à streptocoque du groupe A a été proposé et réalisé le

Ce test, effectué dans les conditions du Décret n° 2018-841*, s'est révélé positif.

Je me permets de vous adresser notre patient pour consultation.

Je vous remercie par avance de votre confiance et vous présente mes plus sincères salutations.

Nom du pharmacien :

Signature :

Commentaire du pharmacien :

.....
.....
.....
.....
.....

- Décret n° 2018-841 du 3 octobre 2018 relatif aux conseils et prestations pouvant être proposés par les pharmaciens d'officine dans le but de favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes